

# Pipi a letto

L'enuresi notturna

## Pipi-Stop®

apparecchio segnalatore senza fili, in noleggio,  
per i bambini affetti da enuresi



## Fare pipì a letto!

Contrariamente a quanto si possa immaginare, la pipì a letto è un problema estremamente frequente che resta tuttavia **tabù**. Proprio per questo, sia il bambino che soffre di enuresi notturna che la sua famiglia sono sottoposti a una notevole pressione.

Quasi il 10% dei bambini di 6 anni e il 6% dei bambini di 10 anni fa la pipì al letto durante il sonno. Secondo diversi studi, tra i bambini enuretici di più di 5 anni, l'enuresi è ereditaria in una percentuale che varia tra il 70 e l'85% dei casi. Inoltre, i maschi ne sono più colpiti delle femmine.

Grazie a queste cifre potete notare **che non siete gli unici colpiti da questo problema**. Ma anche in questa situazione non c'è motivo di drammatizzare, in quanto **vostro figlio può guarire da questa malattia e riacquisire fiducia in se stesso**.

Generalmente, all'età di 5-6 anni, i bambini smettono naturalmente di fare la pipì a letto, ma talvolta necessitano di più tempo. Ciò dipende dalla maturità del bambino e dal suo sviluppo fisico.

## L'enuresi è diventata un ostacolo per il vostro bambino?

Vostro figlio non può più partecipare ad alcune delle attività di gruppo (dormire da un amico, andare in campeggio, in gita con la scuola, ecc.)? Se è così, **è finalmente giunto il momento di occuparsi seriamente del problema!** Insieme faremo tutto possibile affinché non faccia più la pipì a letto.

Il nostro metodo è basato sul **condizionamento del riflesso secondo Pavlov** (terapia comportamentale dell'enuresi notturna).

**Pipi-Stop è un metodo** che guarisce senza medicine e si presenta sotto

forma di un **apparecchio segnalatore elettronico**.


La maggior parte dei bambini affetti da enuresi ha un sonno estremamente profondo e non è pertanto consapevole della minzione involontaria durante il sonno.

Grazie all'allarme che si attiverà sempre al momento giusto (alla fuoriuscita delle prime gocce d'urina), il bambino impara a reagire e **sviluppa il riflesso condizionato di trattenere l'urina**. Quando la sua vescica sarà piena, si sveglierà e andrà in bagno.

## Pipì-Stop è molto semplice da utilizzare

Il rivelatore d'urina (foglio di plastica conduttore) si mette negli slip. In questo modo, il rivelatore è ben posizionato.

Al momento della fuoriuscita delle prime gocce d'urina, il trasmettitore invia un segnale al ricevitore e viene attivato l'allarme (suoneria + luce lampeggiante).

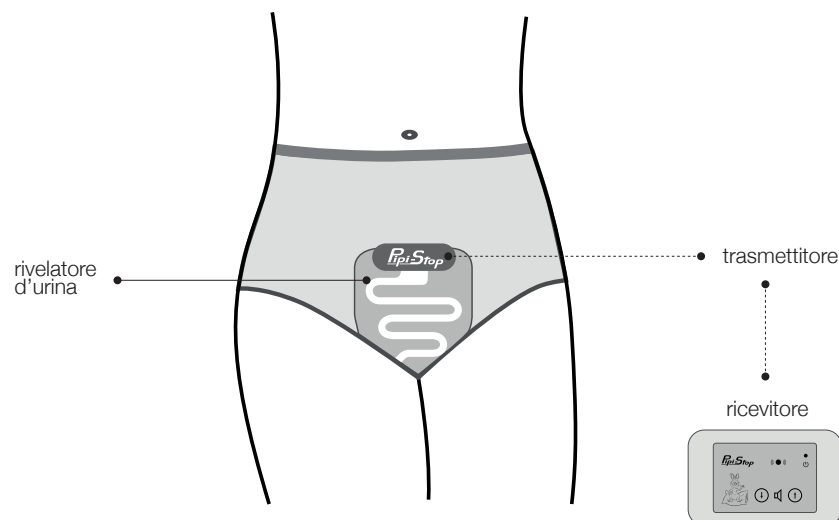

## Per una cura di successo

- Il bambino dev'essere motivato e partecipare alla terapia
- Durante l'allarme, il bambino dev'essere **completamente sveglio** (essere cosciente). Una persona adulta lo deve far alzare e parlargli affinché l'indomani si ricordi di quanto accaduto
- Il bambino deve **essere svegliato soltanto una volta a notte** (l'effetto dell'apprendimento resta identico)
- Prima di iniziare la cura, consultare il pediatra per escludere eventuali cause organiche dell'enuresi.

## I vantaggi dell'apparecchio Pipì-Stop

- ✓ È il sistema **più efficace** per la cura dell'enuresi (~90 % di successi)
- ✓ È il sistema che **riscontra il minor numero di ricadute**
- ✓ È **privo di sostanze chimiche** e, dunque, **senza effetti collaterali**
- ✓ È **senza fili**: il bambino può muoversi liberamente senza nessun rischio!
- ✓ **Non comporta pericoli**: le onde del trasmettitore sono molto deboli (oltre 100'000 volte più deboli di quelle di un cellulare) e vengono trasmesse soltanto durante l'allarme
- ✓ **Non obbliga il bambino a evitare di bere**, nemmeno la sera
- ✓ **Cura in tempi brevi**: in media da 6 a 12 settimane
- ✓ **Lunga esperienza**: da oltre **85 anni** curiamo con successo i bambini affetti da enuresi. Centinaia di testimonianze e lettere di riconoscimento confermano continuamente l'efficacia del nostro metodo
- ✓ **Svolgimento della cura**: potete sempre contattarci per sottoporci le vostre domande relative alla cura grazie alla consulenza compresa nel noleggio
- ✓ **Pipì-Stop** si conforma alle direttive RoHS (**conformità alle norme CE**)

Per beneficiare del **contributo della vostra cassa malattia**, il bambino deve avere **5 anni compiuti**. Non dimenticate di chiedere la ricetta al vostro medico curante.

**L' apparecchio segnalatore Pipì-Stop è in noleggio.**

Per ordinarlo o per ulteriori informazioni, contattarci o visitare il nostro sito Internet: [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)

## Melebi SA

Parkweg 12  
2502 Biel/Bienne  
tel. 032 751 27 95  
fax 032 751 27 82

mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch)  
[www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)



**CE** Nostro apparecchio  
riempie le direttive RoHS