


## Regolazione del volume

**Aumentare il volume:** premendo il bottone  fino al volume desiderato

**Abbassare il volume:** premendo il bottone  fino al volume desiderato

Per attivare la modalità **silenziosa**, premere contemporaneamente i due tasti del volume.  
Per disattivarla, basta premere uno dei tasti.

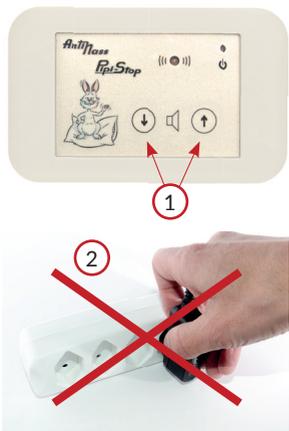

## Dopo la minzione notturna

**Per far cessare l'allarme:**

**1. Scollegare il trasmettitore dal rilevatore di urina**

*Se l'allarme dura più di 3 minuti, premere brevemente uno dei 2 pulsanti di regolazione del volume sul ricevitore per fermarlo*

**2. Non scollegare il cavo di alimentazione** per spegnere l'allarme

## Pulizia del rilevatore di urina e del trasmettitore:

1. Scollegare il trasmettitore dal rilevatore di urina
2. Lavare il rilevatore di urina e il trasmettitore sotto acqua corrente tiepida
3. Asciugare delicatamente il rilevatore e il trasmettitore **NON SFREGARE IL RILEVATORE!**



## Melebi SA

Parkweg 12  
2502 Biel/Bienne  
telefono 032 751 27 95  
fax 032 751 27 82

email: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch)  
[www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)



 Il nostro apparecchio è conforme alle direttive RoHS

Versione maggio 2021

# Istruzioni per l'uso del Pipi-Stop

## Elementi dell'apparecchio Pipi-Stop®



Rilevatore di urina



Ricevitore




Trasmettitore



Trasformatore

## TESTARE IL SISTEMA

Fare riferimento ai video dei test: [www.pipi-stop.ch/it/terapia-pipi-stop/istruzioni-per-uso/](http://www.pipi-stop.ch/it/terapia-pipi-stop/istruzioni-per-uso/)

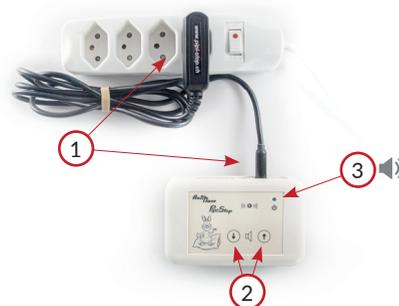

### Test del ricevitore:

1. Collegare il trasformatore ad una presa (230V) e collegarlo al retro del ricevitore
2. Premere brevemente **uno dei 2 pulsanti** di regolazione del volume
3. **Risultato del test punto 1 e 2:** luce blu accesa + suono

### Test del trasmettitore:

1. Collegare i 2 pulsanti a pressione con un cucchiaino di metallo
2. **Risultato del test:** luce bianca lampeggiante + suono





### Test del sistema completo:

1

1. Fissare il trasmettitore al rilevatore (il rilevatore dev'essere disimballato)
2. Collegare la linguetta con un cucchiaino
3. Risultato del test: luce bianca lampeggiante + suono



## Preparazione del trasmettitore e del rilevatore di urina

Fissare il trasmettitore al rilevatore di urina (la direzione della polarità è irrilevante)



1



2



3



4



Idealmente, posizionare il rilevatore e il trasmettitore tra 2 paia di slip. Ciò eviterà eventuali falsi allarmi dovuti alla sudorazione e permetterà di fissare meglio gli elementi.

Posizionare il rilevatore di urina con il trasmettitore sulla pancia del bambino (con il trasmettitore rivolto verso l'esterno) e la linguetta tra le gambe. Il rilevatore di urina non deve essere piegato a metà, ma è normale che assuma la forma del corpo.

## Importante!

### Un test con acqua non fa scattare l'allarme!

Se l'allarme non suona: verificare che il ricevitore e il trasmettitore si trovino nelle immediate vicinanze. Se il Pipi-Stop non funziona dopo aver effettuato questi controlli, vi preghiamo di contattarci immediatamente.

### Sicurezza / Manutenzione

Il ricevitore e il trasformatore non devono MAI venire a contatto con l'acqua (pericolo di scossa elettrica!)

Il trasmettitore non deve MAI essere aperto. La batteria può essere cambiata solo da Melebi SA per motivi di impermeabilità.

Utilizzare UNICAMENTE il nostro trasformatore 12V con il nostro ricevitore per evitare una sovratensione!

Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da Melebi SA.

## Preparazione del ricevitore

Collegare il trasformatore al retro del ricevitore e collegarlo ad una presa da 230 volt (la spia blu si accende + segnale acustico)

Posizionare il ricevitore sul comodino del bambino

