

Istruzioni per l'uso del Pipi-Stop

Elementi dell'apparecchio Pipi-Stop®



Rilevatore di urina



Tasca di flanella



Ricevitore




Trasmettitore



Trasformatore

TESTARE IL SISTEMA

Fare riferimento ai video dei test: www.pipi-stop.ch/it/terapia-pipi-stop/istruzioni-per-uso/

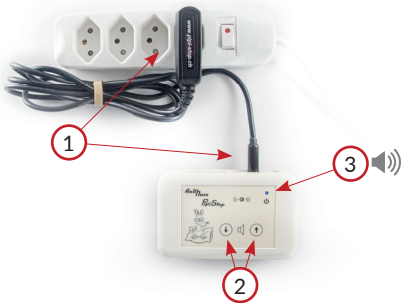

Test del ricevitore :

1. Collegare il trasformatore ad una presa (230V) e collegarlo al retro del ricevitore
2. Premere brevemente **uno dei 2 pulsanti** di regolazione del volume
3. **Risultato del test punto 1 e 2:**
luce blu accesa + suono

Test del trasmettitore :

1. Collegare i 2 pulsanti a pressione con un cucchiaino di metallo
2. **Risultato del test:**
luce bianca lampeggiante
+ suono





Test del sistema completo:

1

1. Fissare il trasmettitore al rilevatore (*il rilevatore dev'essere disimballato*)
2. Collegare la linguetta con un cucchiaino
3. **Risultato del test:** luce bianca lampeggiante + suono



Importante!

Un test con acqua non fa scattare l'allarme!

Se l'allarme non suona: verificare che il ricevitore e il trasmettitore si trovino nelle immediate vicinanze. Se il Pipi-Stop non funziona dopo aver effettuato questi controlli, **vi preghiamo di contattarci immediatamente.**

Sicurezza / Manutenzione

Il ricevitore e il trasformatore non devono MAI venire a contatto con l'acqua (*pericolo di scossa elettrica!*)

Il trasmettitore non deve MAI essere aperto. La batteria può essere cambiata solo da Melebi SA per motivi di impermeabilità.

Utilizzare **UNICAMENTE** il nostro trasformatore 12V con il nostro ricevitore per evitare una sovratensione!

Eventuali riparazioni devono essere effettuate **esclusivamente** da Melebi SA.

Preparazione del trasmettitore e del rilevatore di urina

Fissare il trasmettitore al rilevatore di urina
(la direzione della polarità è irrilevante)



①

②

③




Far scivolare il rilevatore di urina nella tasca di flanella in modo che il trasmettitore sia rivolto verso l'alto. Ripiegare quindi il lembo della tasca verso l'interno e assicurarsi che tutto sia ben fissato.

④

⑤

⑥

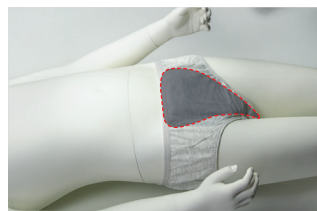

Inserire quindi la tasca preparata in uno slip e assicurarsi che il trasmettitore sia all'esterno (non contro il corpo), con la parte stretta tra le gambe.

Preparazione del ricevitore


Collegare il trasformatore al retro del ricevitore
e collegarlo ad una presa da 230 volt
(la spia blu si accende + segnale acustico)

Posizionare il ricevitore sul comodino del bambino




Regolazione del volume

Aumentare il volume: premendo il bottone  fino al volume desiderato

Abbassare il volume: premendo il bottone  fino al volume desiderato

Per attivare la modalità **silenziosa**, premere contemporaneamente i due tasti del volume.
Per disattivarla, basta premere uno dei tasti.

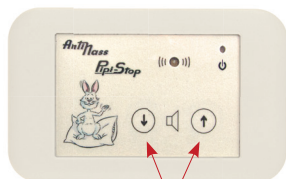

Dopo la minzione notturna

Per far cessare l'allarme:

1. Scollegare il trasmettitore dal rilevatore di urina

Se l'allarme dura più di 3 minuti, premere brevemente uno dei 2 pulsanti di regolazione del volume sul ricevitore per fermarlo

2. Non scollegare il cavo di alimentazione per spegnere l'allarme !

Pulizia del rilevatore, del trasmettitore e della tasca di flanella:

Separare le singole parti e lavarle immediatamente e accuratamente sotto acqua corrente tiepida.



Sciagquare il trasmettitore e il rilevatore di urina e asciugarli con cura
(NON SFREGARE IL RILEVATORE !)


Dopo aver pulito la tasca di flanella, strizzarla, appenderla e lasciarla asciugare all'aria. *(asciugatura rapida)*

Melebi SA

Parkweg 12
2502 Biel/Bienne
tel. 032 751 27 95
fax 032 751 27 82

email: info@melebi.ch
www.pipi-stop.ch

 **Pipi-Stop®**
Swiss made

 Il nostro apparecchio è conforme alle direttive RoHS