

# Pipi au lit

L'énurésie nocturne

## Pipi-Stop®

appareil avertisseur sans fil,  
en location pour enfants énurétiques



Swiss made

## Mouiller le lit!

Ce problème est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Pourtant, le sujet reste **tabou**. Non seulement l'enfant touché par l'énurésie nocturne souffre beaucoup, mais encore toute sa famille qui est ainsi mise sous pression.

Près de 10% des enfants de 6 ans et environ 6% des enfants de 10 ans mouillent leur lit durant leur sommeil. Selon différentes études, l'énurésie est héréditaire chez 70 à 85% des enfants énurétiques de plus de 5 ans, et les garçons sont davantage touchés que les filles.

Ces quelques chiffres vous démontrent que **vous n'êtes pas seuls à être concernés par ce problème**. Il n'y a pas lieu de dramatiser. **Votre enfant peut, lui aussi, guérir de cette maladie et reprendre confiance en lui.**

En général, les enfants arrêtent de mouiller leur lit avant l'âge de 5 ou 6 ans. Parfois, il faut un peu plus de temps. Cela dépend de la maturité de l'enfant et de son développement physique.

## L'énurésie est-elle devenue handicapante pour votre enfant ?

Ne peut-il plus prendre part à certaines activités comme les autres enfants (aller dormir chez un copain ou une copine, partir en camp avec l'école, etc.) ?

Si oui, **c'est le moment de prendre sérieusement le problème en main!** Ensemble, nous allons tout entreprendre afin d'éliminer cet inconvénient.

Notre méthode est basée sur le **conditionnement du réflexe de Pavlov** (thérapie comportementale de l'énurésie nocturne).

**Pipi-Stop** est une méthode de guérison **sans médicaments**, qui se présente sous forme d'un **appareil avertisseur électronique**.


La plupart des enfants énurétiques dorment très profondément et de ce fait, n'arrivent pas à prendre conscience de leur miction nocturne involontaire.

Par l'alarme, qui sera toujours activée au bon moment (dès les premières gouttes d'urine), l'enfant pourra apprendre à réagir et à **développer dans son subconscient le réflexe conditionné de retenir son urine**. Si sa vessie est bien remplie, il se réveillera et pourra se rendre aux toilettes.

## Pipi-Stop est très simple à utiliser

Le détecteur d'urine (feuille plastique conductrice) se porte dans le slip. Ainsi le détecteur reste bien en place.

Dès les premières gouttes d'urine, l'émetteur envoie un signal au récepteur : l'alarme est activée (sonnerie + lumière clignotante).

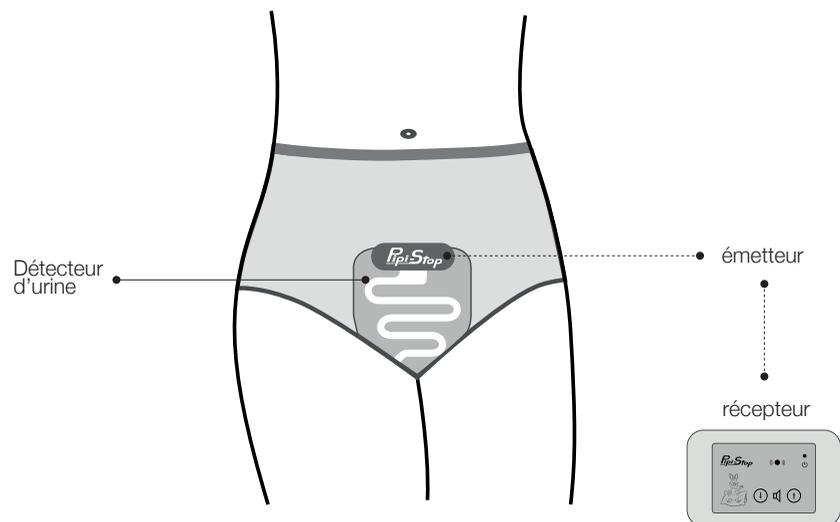

## Pour réussir le traitement

- L'enfant doit être motivé et participer à la thérapie
- L'enfant doit être **réveillé complètement** (être conscient) au moment de l'alarme. Il faut donc qu'un adulte le lève, lui parle, de sorte que le lendemain matin, il s'en souvienne
- L'enfant ne doit **être réveillé qu'une seule fois par nuit** (l'effet d'apprentissage est le même)
- Avant de commencer le traitement, il est conseillé de consulter un médecin afin d'exclure toute cause organique de l'énurésie

## Les avantages avec Pipi-Stop

- ✓ Le moyen **le plus efficace** pour le traitement de l'énurésie (~90% de réussites)
- ✓ Le moyen qui **compte le moins de rechutes**
- ✓ **Pas de substances chimiques, donc pas d'effets secondaires**
- ✓ **Sans fil** : l'enfant garde toute sa liberté de mouvement. Pas de risques de s'emmêler!
- ✓ **Sans danger** : les ondes émises sont très faibles (plus de 100'000 fois plus faibles que celles d'un téléphone mobile) et ne sont transmises que pendant l'alarme
- ✓ **Aucune restriction de boisson, même le soir**
- ✓ **Traitement relativement court** : en moyenne entre 6 et 12 semaines
- ✓ **Très longue expérience** : depuis **plus de 85 ans** nous traitons avec succès des enfants énurétiques. Des centaines de témoignages et lettres de reconnaissance confirment continuellement l'efficacité de notre méthode
- ✓ **Suivi de la cure** : conseils et renseignements concernant le traitement compris dans le prix de location
- ✓ **Pipi-Stop** remplit les directives RoHS (**conforme aux normes CE**)

Pour bénéficier de la **prise en charge par votre caisse maladie**, l'enfant traité doit avoir **5 ans révolus**. N'oubliez pas de demander une ordonnance médicale à votre médecin traitant.

**Notre appareil avertisseur Pipi-Stop est en location.**

Pour le commander ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter ou visiter notre site Internet [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)

### Melebi SA

Parkweg 12  
2502 Biel/Bienne  
tél. 032 751 27 95  
fax 032 751 27 82

mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch)  
[www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)



CE Notre appareil remplit les directives RoHS